

### ● MICRO NEEDLING FÜR SIE & IHN

Die Haut setzt sich aus drei Schichten, der Oberhaut (Epidermis) mit ihrer Hornschicht, der Lederhaut (Corium) und der Unterhaut (Subcutis) zusammen. Die Dicke der jeweiligen Schicht ist sehr unterschiedlich und unter anderem abhängig von Körperteil, Alter und Geschlecht.



Je nach Hautareal, Nadellänge und Skin-Roller-Modell (kosmetischer oder medizinischer Skin-Roller) werden ganz unterschiedliche Hautschichten erreicht.

### ● KOSMETISCHES NEEDLING

Kosmetisches Needling ist eine einfache, aber effektive Technik in der Hautverjüngung der oberen Hautschicht, in der sich weder Nerven noch Blutbahnen befinden. Daher ist die Behandlung angenehm und **schmerzfrei**.



Klinische Studien haben gezeigt, dass **Seren oder Gels bis zu 100 mal besser absorbieren können**, als wenn die Produkte auf traditionelle Weise auf die Haut aufgetragen werden.

### ● MEDIZINISCHES NEEDLING

Bei diesem Eingriff dringt der Arzt in tiefere Hautschichten ein. Um den Eingriff möglichst schmerzfrei für die Patienten zu gestalten, wird ca. 45 Minuten vor dem Eingriff eine Betäubungscreme auf die zu behandelnden Stellen aufgetragen. Der Arzt wird je nach Intensität und Sensibilität und abgestimmt auf den Hauttyp eventuell noch andere Schmerzmittel vorschlagen.



Adressen führenderer Ärzte, welche das Medizinische Needling anbieten, erhalten Sie gerne auf Anfrage.

## IB Skin-Roller™

### Cosmetic

0,20 mm für den persönlichen Gebrauch

- Stimuliert die Haut
- Intensiviert die Aufnahme von Seren/Gels
- Regeneriert die Zellen in kurzer Zeit mit abgestimmten Produkten
- Optimierung der täglichen Pflegeprodukte
- Gold, ideal für sensible Haut

### Medical

ab 1,00 mm nur für den medizinischen Bereich

- Stimuliert die Haut
- Intensiviert die Aufnahme von Seren/Gels
- Regeneriert die Zellen in kurzer Zeit mit abgestimmten Produkten
- Glättet & strafft
- Hellt fleckige, lichtgeschädigte Haut auf mit abgestimmten Produkten
- Minimiert Falten
- Verkleinert Poren
- Aktiviert körpereignes Kollagen
- Gleicht Aknenarben an

#### Haftungsausschluss

Geben Sie niemals einen Skin-Roller anderen Personen zum Gebrauch und verwenden Sie ihn nicht bei Kindern oder Tieren. Wenn Sie den Skin-Roller privat benutzen, verwenden Sie diesen auf eigenes Risiko und Verantwortung. Auch wenn viele unserer Kunden sehr positive Ergebnisse erfahren, garantieren wir nicht für Erfolge. Beachten Sie die Kontraindikationen und Empfehlungen.

#### Hinweise anderer Quellen

Es gibt viele Informationen zum Thema «Micro Needling» (auch Skin Needling genannt) verschiedenster Quellen. Weder beurteilen, noch kommentieren wir Empfehlungen anderer Spezialisten. Wir sind uns bewusst, dass unsere Angaben möglicherweise von denen anderer Autoren abweichen können. Unsere Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen, dem Wissen von Dermatologen, Ärzten und Kosmetikerinnen.

**Jeder Mensch und seine Haut sind einzigartig. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir daher immer einen Hautpflegespezialisten mit einzubeziehen.**



Beautiful with  
the IB Skin-Roller™

*Intensivieren Sie Ihre  
Hautpflege einfach,  
effektiv & schnell*

Eine schmerzfreie, kosmetische Needling Variante  
für alle Hauttypen jeden Alters

## EMPFEHLUNGEN für Micro Needling (Cosmetic)

Der IB Skin-Roller™ ist aus hygienischen Gründen **nur für ein und dieselbe Person bestimmt und darf nicht weitergegeben oder mit anderen Personen geteilt werden**. Vor und nach der Anwendung gründlich reinigen. Die 192 Nadeln des Rollerkopfs dürfen nie auf eine harte Fläche gelegt oder beschädigt werden. Beachten Sie die Kontraindikationen und Empfehlungen. Nur anwenden wie angegeben.

Falls Hautstellen durch die Anwendung empfindlich werden oder sich andere negative Reaktionen zeigen, die Behandlung unterbrechen, bis sich diese beruhigt haben. Den Roller ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

### ● Abends ist die ideale Zeit

Am Abend ist die beste Zeit für eine Behandlung, da sich die Poren über die Nacht wieder schliessen (ca. 6-8 Stunden). Idealerweise integrieren Sie kosmetisches Needling in Ihre abendliche Pflege nach der Reinigung.

### ● Hygiene beachten

Reinigen Sie gründlich die Hände, die zu behandelnde Hautflächen sowie den IB Skin-Roller mit einem geeigneten Desinfektionsmittel vor dem Gebrauch. Bei Verwendung von ungeeigneter Desinfektionslösung oder Methode übernehmen wir keine Haftung.

### ● Sensible Bereiche beachten und auslassen

Lippen, Augenbereich und Augenlider auslassen. Beim Kehlkopfbereich ganz vorsichtig rollen.

### ● Ohne starken Druck anwenden

Auch ohne starken Druck erzielen Sie hervorragende Ergebnisse; die regelmässige Anwendung über einen längeren Zeitraum ist aber wichtig.

### ● Haut nur mit abgestimmten Produkten pflegen

Achten Sie darauf, dass die nach dem Skin-Needling verwendeten Produkte frei von Duft- und Zusatzstoffen sind, die allergische Reaktionen hervorrufen können.

### ● IB Skin-Roller reinigen & trocken lagern

Reinigen Sie den IB Skin-Roller nach jedem Einsatz mit fliessend heissem Wasser und versorgen Sie ihn trocken für die nächste Behandlung. Reinigen Sie zudem Ihren Roller mindestens 1 Mal in der Woche mit einem geeigneten Desinfektionsmittel, das den Roller nicht korrodieren lässt. Versorgen Sie den Roller erst, wenn dieser vollständig trocken ist. Am besten legen Sie den Roller zum Trocknen in die Vertiefung, welche in der Schutzkappe vorgesehen ist.

### ● Kontraindikationen (Kosmetisches Skin Needling)

Muttermale, Warzen und Bereiche mit Rosacea müssen ausgelassen werden. **Skin Needling ist nicht gestattet bei:** offenen Wunden, Infektionen, problematischer Haut, Schuppenflechte, Entzündungen, aktiver Akne, Ekzemen, Herpes, Psoriasis, Aktinischer Keratose, Keloide, Hautkrebs, Maligne Hauterkrankungen, Kollagenosen und Schwangerschaft. Falls Schmerz- und Fiebermedikamente, hochdosiertes Vitamin E, Blutverdünnungsmedikamente oder andere Medikamente eingenommen werden, besprechen Sie die Behandlung mit einem Spezialisten.

Im Zweifelsfall, bei Hauterkrankungen und Diabetes konsultieren Sie immer einen Arzt, bevor Sie mit einer Skin Needling-Behandlung beginnen.

## ANWEISUNGSINSTRUKTIONEN FÜR IHR GESICHT



Verwenden Sie den Roller in Ihrer Hautpflegeroutine nach der Reinigung und dem Auftragen eines Toners. Teilen Sie das Gesicht in Zonen ein. Beginnen Sie mit der rechten Seite, wiederholen Sie dann dieselben Schritte auf der linken Seite. Rollen Sie jede Strecke 2- bis 5-mal, bevor Sie zum nächsten Bereich übergehen.

Nach der Behandlung erhält die Haut eventuell einen rosa Teint für kurze Zeit. **Normalerweise sind**

**fünf Minuten ausreichend für Gesicht und Hals.** Die aufzuwendende Zeit ist jedoch auch abhängig von der Geschwindigkeit wie gerollt wird.




### ● WÄHLEN SIE IHRE ROLL-TECHNIK

Folgen Sie den Anweisungsinstruktionen entsprechend Ihrer Haut-Sensibilität. Die «Methode A» ist intensiver und für Problemzonen geeignet, wohingegen «Methode B» eine sanftere Variante ist.

#### METHODE A – INTENSE (intensiver)

Teilen Sie die zu behandelnden Bereiche in mehrere Abschnitte: Stirn, Nase, Wangen, Mund, linke und rechte Seite des Halses.

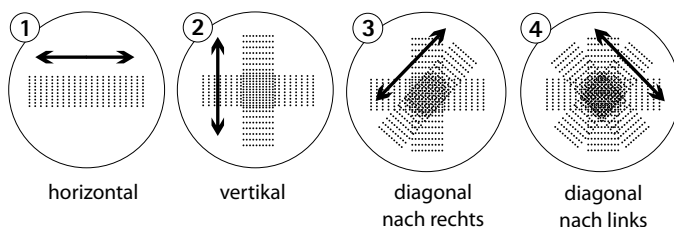


Beginnen Sie mit einem kleinen Bereich und rollen 2- bis 5-mal horizontal vorwärts und zurück. Dann fahren Sie über den gleichen Bereich vertikal, diagonal nach rechts und diagonal nach links. In gleicher Weise verfahren Sie mit dem Stirn- und Wangenbereich oder alle Bereiche, die Sie punktuell behandeln möchten.

#### METHODE B - GENTLE (sanfter)

- 1 Rollen Sie beim Hals vertikal von unten nach oben und von oben nach unten. Vorsicht beim Kehlkopfbereich!
- 2 Beim nächsten Schritt, beginnen Sie in der Mitte des Kinns und rollen gemäss den Gesichtskonturen in Richtung des Ohres und wieder zurück. Dann führen Sie die gleichen Bewegungen abgehend vom Mundwinkel aus. Setzen Sie diesen Vorgang weiter fort, bis Sie schliesslich von der Nase, unter dem Auge in Richtung Ohr gelangen. Augenbereich auslassen!
- 3 Nun rollen Sie über den gesamten Wangenbereich inklusiv oberhalb der Lippen in vertikaler Richtung von unten nach oben und von oben nach unten. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis Sie beim Ohr angelangt sind. Pressen Sie Ihre Lippen fest zusammen, sodass Sie den Bereich oberhalb der Lippen einfach erreichen können.
- 4 Beginnen Sie zwischen den Augenbrauen und rollen Sie sanft entlang dem Nasenrücken nach unten.
- 5 Augenfältchen: Beginnen Sie ausserhalb des Auges und rollen Sie sanft horizontal in Richtung zur oberen Ohrhälfte und wieder zurück.

- 6 Augenfältchen: Rollen Sie nun vertikal über den gleichen Bereich von unten nach oben und wieder zurück.
- 7 Bei der Stirn rollen Sie von den Augenbrauen ausgehend bis in den Haaransatz in horizontaler Richtung nach rechts und links in die Stirnmitte.
- 8 Behandeln Sie die Stirn nun in vertikaler Richtung von unten nach oben und von oben nach unten. Beginnen Sie auch hier direkt bei den Augenbrauen und rollen Sie Richtung Haaransatz.
- 9 Wiederholen Sie nun die Schritte 1-8 auf der linken Seite des Halses und des Gesichts.

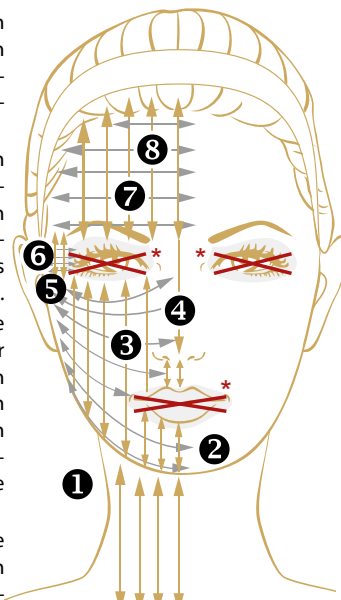

\* Kein Needling in diesem Bereich!

- 10 Nach der Behandlung verteilen Sie mit den Händen oder einem sauberen Pinsel eine grosszügige Menge geeignetes Gel oder Serum auf die Haut. Wenn alles vollständig eingezogen ist, können Sie mit Ihrer gewohnten Pflege abschliessen. Nach der Behandlung direkte Sonneneinstrahlung meiden. Ausserdem ist es wichtig Sonnenschutz (Breitband-Spektrum Sonnenschutz) zu verwenden.

### ● ANWENDUNGSINTENSITÄT (Kosmetisches Skin Needling)

Die Behandlung mit dem IB Skin-Roller (Cosmetic) kann, nachdem sich die Haut daran gewöhnt hat, täglich am Abend durchgeführt werden. Zu Beginn empfehlen wir Behandlungen 1-bis 2-mal wöchentlich.

### ● AUCH FÜR ANDERE KÖRPERTEILE EINSETZBAR

Der IB Skin-Roller ist auch für andere Körperteile wie Dekolleté, Hände, Arme, Po und andere Problemzonen einsetzbar.



### ● IB SKIN-STAMPS AUCH ERHÄLTICH FÜR KLEINE, SCHWER ERREICHBARE ZONEN

Sehr geeignet für schwer erreichbare kleine Zonen; zum Beispiel oberhalb des Mundes und um die Augen herum.

**IB Skin-Roller & Skin-Stamps sind:  
vergoldet • einzigartig • langlebig • elegant  
auto-klavierbar • leicht zu reinigen**