

● MICRO-NEEDLING PER LUI E PER LEI

La pelle è costituita da tre strati: l'epidermide (epidermis) con il suo strato corneo, il derma (corium) e il tessuto sottocutaneo (subcutis). Lo spessore di ciascuno strato è molto variabile e dipende, dalla corporatura, dall'età e dal sesso.



A seconda della zona della pelle, della lunghezza dell'ago e del modello di Skin-Roller (rullo per la pelle cosmetico o medico) si raggiungono i diversi strati della pelle.

● NEEDLING COSMETICO

Il needling cosmetico è una tecnica semplice ma efficace che permette il ringiovanimento dello strato superiore della pelle, quello in cui non ci sono né nervi né vasi sanguigni. Perciò il trattamento è piacevole e indolore.



Studi clinici hanno dimostrato che con Skin-Roller sieri e gel possono essere assorbiti fino a **100 volte meglio**, rispetto a ciò che succede con l'applicazione tradizionale.

● NEEDLING MEDICO

Durante questa procedura il medico penetra negli strati più profondi della pelle. Per rendere l'intervento il più possibile indolore per il paziente, circa 45 minuti prima viene applicata una crema anestetica sulle zone da trattare. Eventualmente il medico può suggerire, a seconda dell'intensità e la sensibilità del vostro tipo di pelle, l'assunzione di altri antidolorifici.



Su richiesta sono disponibili indirizzi di medici altamente qualificati che offrono il needling medico.

© by Intense Beauty | 10 marzo 2013

IB Skin-Roller™

Cosmetico

0,20 millimetri -
per uso personale

- Stimola la pelle
- Intensifica l'assorbimento di sieri e gel
- Rigenera le cellule in breve tempo con prodotti compatibili
- Ottimizzazione dei prodotti per la cura quotidiana
- Gold, ideale per le pelli sensibili

Medico

da 1.00 mm -
solo per il settore medico

- Stimola la pelle
- Intensifica l'assorbimento di sieri e gel
- Rigenera le cellule in breve tempo con prodotti compatibili
- Leviga e rassoda
- Rende più luminosa la pelle, danneggiata o macchiata, con prodotti compatibili
- Minimizza le rughe
- Riduce i pori
- Attiva il collagene del corpo
- Ammorbidisce le cicatrici da acne

Esclusione di responsabilità

Non lasciare che altre persone utilizzino Skin-Roller e non utilizzarlo su bambini o animali. L'utilizzo domestico dello Skin-Roller è a proprio rischio e pericolo. Anche se molti dei nostri clienti hanno raggiunto risultati molto positivi, non possiamo garantirne il successo. Leggere le controindicazioni e le raccomandazioni.

Avvertenze di altri autori

Sono disponibili molte informazioni sull'argomento "micro-needling" (conosciuto anche come skin needling), provenienti dalle fonti più svariate. Noi non ci permettiamo di esprimere valutazioni né di fare commenti sulle avvertenze di altri specialisti. Siamo consapevoli del fatto che le nostre informazioni possono differire da quelle di altri autori. Le nostre raccomandazioni si basano sulla nostra esperienza e sul know-how di estetiste, medici e dermatologi.

**Ogni essere umano è unico, proprio come la sua pelle.
Per ottenere risultati ottimali vi consigliamo di rivolgervi sempre a uno specialista della cura della pelle.**

Distributore esclusivo: Intense Beauty GmbH
Weinberghoehe 36a | CH - 6340 Baar/Zug | Svizzera
Tél + 41 41 710 66 60 | Fax + 41 41 710 66 61
info@intense-beauty.com

www.intense-beauty.com

Salvo errori



Beautiful with
the IB Skin-Roller™

*Intensifica la cura della
tua pelle in modo
semplice, efficace e veloce*

Una variante indolore del needling cosmetico,
per tutti i tipi di pelle ed età

RACCOMANDAZIONI per il micro-needling (cosmetic)

Per motivi igienici l'IB Skin-Roller può essere utilizzato da una sola persona e non può essere passato ad altri o condiviso. Pulire accuratamente prima e dopo l'utilizzo. I 192 aghi della testa del Roller non devono essere posizionati su una superficie dura o danneggiati. Leggere le controindicazioni e le raccomandazioni. Utilizzare solo come indicato.

Se a seguito dell'applicazione la pelle diventa sensibile o si evidenziano altre reazioni negative, interrompere il trattamento fino a quando queste non si saranno attenuate. Tenere il Roller fuori dalla portata dei bambini.

● La sera è il momento ideale

La sera è il momento migliore per il trattamento perché durante la notte i pori si richiudono (6-8 ore circa). Sarebbe opportuno inserire il needling cosmetico tra i vostri trattamenti serali per la cura della pelle, subito dopo la pulizia.

● Norme igieniche

Prima dell'uso, pulite accuratamente le mani, le aree della pelle trattate e l'IB Skin-Roller con un disinfettante appropriato.

● Fate attenzione e non trattate le aree sensibili

Prima dell'uso, pulite accuratamente le mani, le aree della pelle da trattare e l'IB Skin-Roller con un disinfettante appropriato. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'uso improprio di disinfettante e di metodo.

● Applicare senza una forte pressione

Anche senza una forte pressione potete ottenere ottimi risultati, ma è fondamentale l'utilizzo regolare in un periodo di tempo più lungo.

● Trattate la pelle solo con prodotti compatibili

Assicuratevi che i prodotti usati dopo lo skin needling siano privi di profumo e additivi che possono causare reazioni allergiche.

● Pulite e conservate in luogo asciutto l'IB Skin-Roller

Dopo ogni utilizzo, pulite l'IB Skin-Roller con acqua corrente calda e asciugatelo prima di riporlo. Pulite inoltre il Roller almeno 1 volta alla settimana con un disinfettante appropriato che non lo corroda. Assicuratevi che sia completamente asciutto. La soluzione migliore consiste nel lasciarlo asciugare nella apposita cavità della custodia.

● Controindicazioni (skin needling cosmetico)

Le voglie, le verruche e le aree con rosacea non devono essere trattate. Lo skin needling non è consentito in caso di: ferite aperte, infezioni, pelle problematica, psoriasi, infiammazioni, acne attiva, eczema, herpes, cheratosi attinica, cheloidi, cancro della pelle, malattie della pelle maligne, malattie del collagene e gravidanza. Se sono stati assunti analgesici e antipiretici, alte dosi di vitamina E, farmaci anticoagulanti o altri medicinali, discutere del trattamento con uno specialista.

In caso di dubbi per ciò che riguarda le malattie della pelle e il diabete, consultare sempre un medico prima di iniziare un trattamento di skin needling.

PROPOSTA DI APPLICAZIONE PER IL VISO



Utilizzate il Roller nei vostri abituali trattamenti di cura della pelle, dopo la pulizia e l'applicazione di un toner. Dividete il viso in zone. Iniziate con il lato destro, quindi ripetete la stessa procedura sul lato sinistro. Fate scorrere il Roller su ogni sezione 2 - 5 volte, prima di passare all'area successiva. Dopo il trattamento, per un breve periodo di tempo, la pelle può assumere un colorito roseo. Generalmente per viso e collo sono sufficienti cinque minuti. Tuttavia, il tempo impiegato dipende anche dalla velocità e dal modo in cui viene usato il Roller.


● SCEGLIETE LA VOSTRA TECNICA ROLL

Seguite le istruzioni in base alla sensibilità della vostra pelle. Il metodo A è più intensivo ed è adatto alle aree problematiche, mentre il metodo B è una variante più delicata.



METODO A - INTENSE (intensivo)

Dividete l'area da trattare in diverse sezioni: fronte, naso, guance, bocca, lati sinistro e destro del collo.

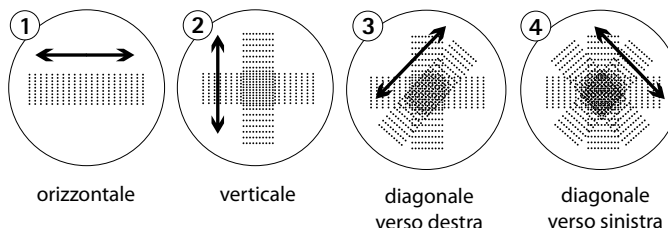

Iniziate con una piccola area e fate scorrere il rullo da 2 a 5 volte in senso orizzontale, avanti e indietro. Poi muovetevi in verticale sulla stessa area, in diagonale verso destra e in diagonale verso sinistra. Procedete allo stesso modo con la fronte e le guance, o con tutte le aree che desiderate trattare in modo specifico.

METODO B - GENTLE (delicato)

1. Applicare il rullo sul collo verticalmente, dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso. Attenzione alla zona laringea!

2. Nel passaggio successivo, iniziate a metà del mento e fate ruotare seguendo i contorni del viso verso l'orecchio e ritorno. Quindi, eseguite gli stessi movimenti partendo dall'angolo della bocca. Continuate la procedura fino al naso, sotto l'occhio verso l'orecchio. Evitate la zona degli occhi!

3. Ora fate ruotare sopra l'intera zona delle guance, compresa la parte sopra le labbra, in direzione verticale dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso. Ripetete la procedura fino alle orecchie. Comprimate le labbra, in modo da poter raggiungere facilmente la zona proprio sopra di esse.

4. Iniziate tra le sopracciglia e fate ruotare il rullo delicatamente lungo il naso verso il basso.

5. Rughe oculari: partite esternamente all'occhio e fate ruotare il rullo delicatamente in senso orizzontale verso la metà superiore dell'orecchio e ritorno.


6. Rughe oculari: quindi rotolate in senso verticale sulla stessa zona dal basso verso l'alto e ritorno.

7. Sulla fronte, fate ruotare il rullo dalle sopracciglia fino all'attaccatura dei capelli in direzione orizzontale verso destra e sinistra nel mezzo della fronte.

8. Trattate quindi la fronte in direzione verticale dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso. Anche qui partite direttamente dalle sopracciglia e fate ruotare il rullo verso l'attaccatura dei capelli.

9. Ripetete quindi i passaggi 1-8 sulla parte sinistra del collo e del viso.

10. Dopo il trattamento della zona cutanea desiderata, applicate il prodotto Environ consigliato dal vostro esperto in cosmesi. Al termine del trattamento, potete concludere con la vostra cura abituale.

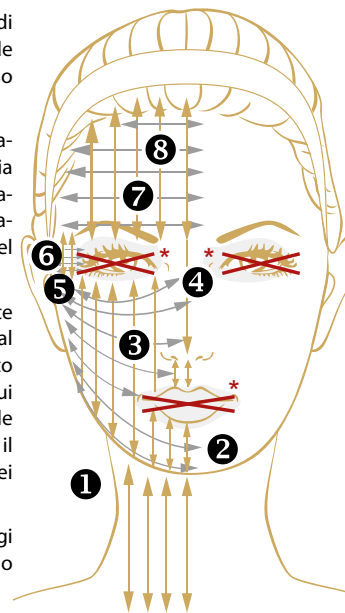

* Nessuna micro iniezione in questa zona !

● INTENSITÀ D'USO (skin needling cosmetico)

Una volta che la pelle si sarà abituata, il trattamento con l'IB Skin-Roller (cosmetico) potrà essere effettuato ogni sera. Per iniziare, si consiglia di effettuare il trattamento 1 o 2 volte a settimana.

● UTILIZZABILE ANCHE SU ALTRE PARTI DEL CORPO

l'IB Skin-Roller può essere utilizzato anche su altre parti del corpo, come décolleté, mani, avambracci, glutei e altre zone problematiche.



● IB SKIN-STAMPS DISPONIBILI ANCHE PER ZONE DI PICCOLE DIMENSIONI DIFFICILMENTE RAGGIUNGIBILI

Particolarmente adatti per zone difficili da raggiungere di piccole dimensioni; ad esempio, l'area sopra la bocca e il contorno occhi.

IB Skin-Roller & Skin-Stamps sono:
dorati • unici • durevoli • eleganti
auto sterilizzanti • facili da pulire